


SHIMADZU
Excellence in Science

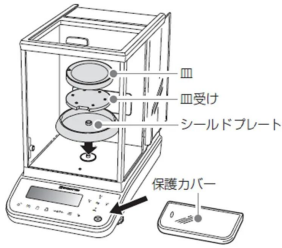

株式会社 島津製作所
SHIMADZU CORPORATION

画像は、分析天びん A P シリーズに取り付けたイメージです。シールドプレート以外は、本商品に含まれません。

(株)島津製作所

自由自在に使える

シールドプレート：S321-74027-01

対応シリーズ：A P シリーズ

A P W-A D ex/W-A D シリーズ 0.0 1 mg 器種/W ex シリーズに標準付属

メーカー販売価格（税抜）：¥1,160

販売価格（税抜）：¥1,160

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AP ex シリーズでは、計量皿回りの構成を2種類用意しています。測定するサンプルと周囲環境に合わせて、どちらか一方の皿回り構成を選択してください。

シールドプレートを使用

通常はこちらをご使用ください。シンプルな皿回り構造のため清掃が容易です。

皿の取り外しがしやすく、清掃性に優れています。また、皿径より大きなサンプルであっても容易に測定できます。

シールドケースとステージを使用

温度変化による対流影響を低減したい場合は、こちらをご使用ください。

エアコンによる気温変化によって発生するひょう量室内の対流影響を低減し、優れた応答性、安定性を実現します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300095
メーカー品番	S321-74027-01
製品名	シールドプレート
形名	-
対応器種	分析天びん A P シリーズ

1. A P exシリーズに標準付属

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

