



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



AND



(株)エー・アンド・ディ

L E Dと音が動作をお知らせ

A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器

イオン発生方式：直流コロナ放電

メーカー販売価格（税抜）：¥ 75,000

販売価格（税抜）：¥ 61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無風イオナイザー A D - 1 6 8 3 A は、コロナ放電により4極の放電電極から正極性または負極性のイオンを生成し、対象物に照射することで除電を行います。風を発生させずに帯電した測定物を計量前に除電することができ、静電気による計量誤差を低減します。本器は、内蔵の I R センサ(非接触の赤外線近接センサ)と別売品の I R スイッチ(A X - I R - S W I T C H)により動作させることができます。また、放電電極ユニットは取り外しうけ、単体で清掃と交換が可能です。

直流式の無風タイプ

粉体の除電に最適

4 chの電極で強力除電

内蔵 I R センサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能

L E Dと音で、動作が確認が可能

場所を取らない洗練されたデザイン

画像は、商品イメージです。

AND




使用例



画像は、はかり本体(別売)の横に設置したイメージです。

画像は、はかり本体(別売)の横に設置したイメージです。

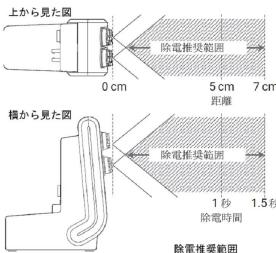

画像は、別売の外部 I R スイッチを付けたイメージです。

画像は、別売の外部 I R スイッチを付けたイメージです。

画像は、別売の外部 I R スイッチを付けたイメージです。

画像は、別売の外部 I R スイッチを付けたイメージです。

メーカー販売価格（税抜）：¥ 75,000

販売価格（税抜）：¥ 61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無風イオナイザー A D - 1 6 8 3 A は、コロナ放電により4極の放電電極から正極性または負極性のイオンを生成し、対象物に照射することで除電を行います。風を発生させずに帯電した測定物を計量前に除電することができ、静電気による計量誤差を低減します。

本器は、内蔵の I R センサ(非接触の赤外線近接センサ)と別売品の I R スイッチ(A X - I R - S W I T C H)により動作させることができます。

また、放電電極ユニットは取り外しうけ、単体で清掃と交換が可能です。

直流式の無風タイプ

粉体の除電に最適

4 chの電極で強力除電

内蔵 I R センサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能

L E Dと音で、動作が確認が可能

場所を取らない洗練されたデザイン

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500317
製品名	無風イオナイザー
型名	A D - 1 6 8 3 A
イオン発生方式	直流コロナ放電
除電推奨距離	放電電極針より 7 cm以内
周囲温度・湿度	温度：5 ~ 40 湿度：85%RH・結露なきこと
放電電極針	タンゲステン 寿命：およそ10,000時間
電源	A C アダプタ：A X - T B 2 4 8
外形寸法	W 68 × D 128 × H 163 mm
本体質量	約 370 g
付属品	取扱説明書・A C アダプタ
J A N コード	49 81046 19868 4


1. 設置が完了するまでは電源を投入しないで下さい。電源を切断するスイッチは本機にありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

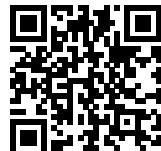

業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)